

การติดตั้ง R2GATE Lite™



R2GATE Lite™ ใช้สำหรับ

- + รับ-ส่งแผนการรักษาระหว่างคุณหมอ กับ R2 Centre
- + ปรับ และอนุมัติตำแหน่งรากเทียม พร้อมส่งข้อมูลให้ R2 Centre

R2GATE Lite สามารถทำงานได้บน Windows, Mac และ iPad



windows



MAC




iPad & iPhone




• I-Pad Air ii & above

การติดตั้ง **R2GATE Lite™** สำหรับ Windows หรือ Mac

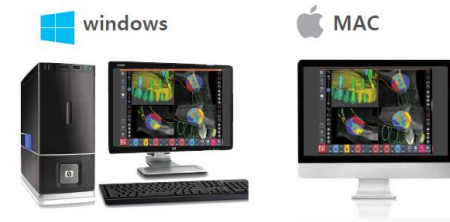

1. เข้าเว็บ www.r2gate.com
2. คลิก **R2GATE DOWNLOAD**
3. เลือก **R2GATE-LITE (PC&MAC)**
4. เลือก **OFFICIAL** version
5. ดาวน์โหลด และติดตั้ง **R2GATE Lite**

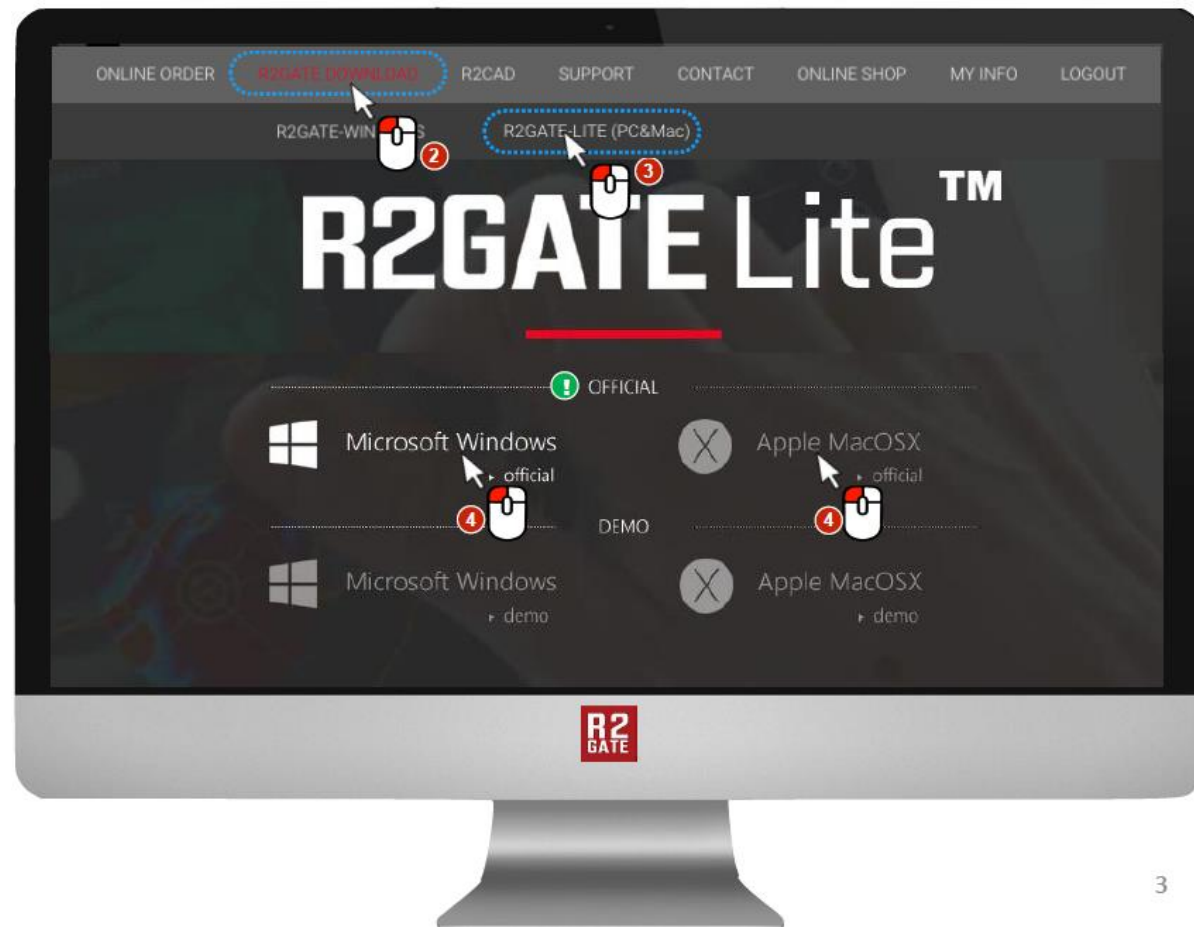

การติดตั้ง R2GATE Lite™

สำหรับ iPad




1. เปิด app Safari
2. เข้าเว็บ www.r2gate.com
3. เลือก OFFICIAL version
4. เลือก install



การติดตั้ง R2GATE Lite™

สำหรับ iPad

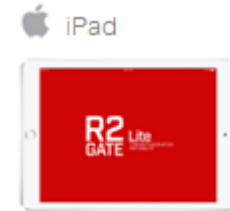


5. เมื่อ app ถูกติดตั้งเสร็จแล้ว
6. เข้าไปที่ System Setting
7. เลือก General
8. เลือก Device Management
9. เลือก Megagen Implant Co., Ltd




การติดตั้ง R2GATE Lite™

สำหรับ iPad

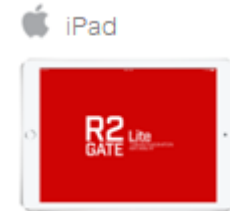

10. เลือก Trust "Megagen Implant Co., Ltd"

11. เลือก Trust

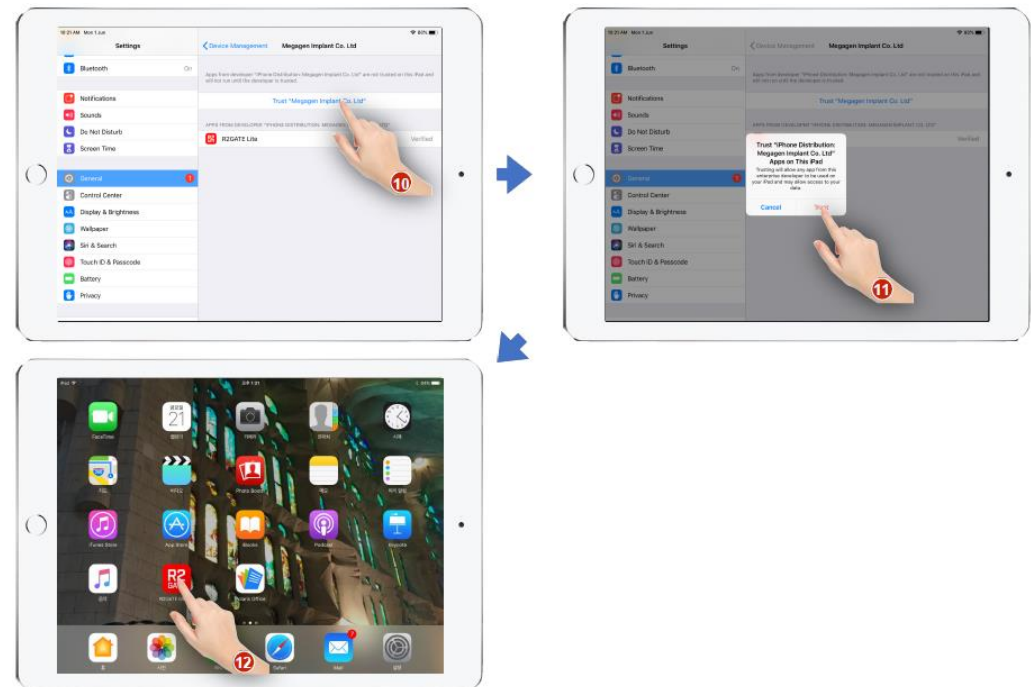

สอบถามเพิ่มเติม

ID: MrOle

